

NewLife® Intensity® 10

Concentrador estacionario de alto caudal

CAIRE®
O₂ is what we do.



DISEÑO PROBADO EN EL TIEMPO
SUMINISTRO DE OXÍGENO VERSÁTIL
FACILIDAD DE SERVICIO



Solución de oxígeno terapéutico de confianza diseñada para flotas de equipos médicos de todo el mundo

Innovación en el suministro de oxígeno a largo plazo

Desde su introducción en 2009, el New Life Intensity 10 ha sido un concentrador estacionario de alto flujo de confianza que satisface las necesidades de suministro de oxígeno de los pacientes en más de 100 países, incluyendo aplicaciones especializadas en el hogar y en centros de atención médica.

Diseño probado en el tiempo

- **Fiabilidad líder en el sector:** un índice de fiabilidad superior al 99 % al sacarlo de la caja y un índice de reparación en garantía inferior al 2 %*.
- **Amplia garantía:** 3 años de garantía para el dispositivo
- **Durabilidad:** diseñado con un compresor y lechos de criba sobredimensionados para minimizar el servicio.

Suministro versátil de oxígeno

- **Suministro de oxígeno:** hasta un 95,5 % de concentración con un máximo de 10 LPM, lo que permite satisfacer una amplia gama de prescripciones de los pacientes.
- **Alta presión de salida:** el primer concentrador de oxígeno que ofrece 20 psi para soportar aplicaciones especiales y hasta 200 pies de tubo de oxígeno.
- **Eficiencia energética:** reducción del consumo de energía, minimizando la carga en la factura energética del paciente.

Facilidad de servicio

- **Mínimo mantenimiento:** diseño y rendimiento de calidad probada para minimizar el servicio requerido.
- **Diseño modular:** un número menor de componentes reduce el tiempo y el esfuerzo de mantenimiento del dispositivo
- **Diagnósticos mejorados:** las alertas de alarma integradas permiten una rápida resolución de problemas

*datos en el archivo



Especificaciones de NewLife Intensity 10

VELOCIDADES DE FLUJO

2,0 - 10,0 lpm

DIMENSIONES

54,6 x 31,8 x 34,2 cm
(69,9 x 41,9 x 36,8 cm)

PESO

58 lb (26,3 kg)

NIVEL SONORO

58 dB(A)

PRESIÓN DE SALIDA

20 psig (138 kPa)

ENERGÍA

600 W

TUBO MÁXIMO

200 pies (61 m)

GARANTÍA

3 años

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Filtro de fieltro: cambiar una vez al año

Filtro de entrada: limpiar semanalmente



Accesorios

CÁNULA NASAL

Adulto

2,1 m (7 pies) CU002-1
7,6 m (25 pies) CU002-4

Pediátrico

2,1 m (7 pies) CU002-7



BOTELLA HUMIDIFICADORA

Número de artículo HU003-1

Caudal 6-15 LPM HU014-1



MÁSCARA

Adulto, Concentración

(Estilo sobre la oreja)
2,1 m (7 pies)
CU006-1



Pediatría, Concentración

2,1 m (7 pies)
CU007-1



TUBO DE OXÍGENO

2,1 m (7 pies) CU004-2
7,6 m (25 pies) CU004-3
15,2 m (50 pies) CU004-1

ADAPTADOR DE SALIDA DE OXÍGENO

Número de artículo

Negro F0025-1

Verde B-776945-00



SureFlow™


Suministro rentable de oxígeno para varios pacientes desde una sola fuente

Control de flujo para varios pacientes

Combine el NewLife Intensity 10 con la estación de flujo de oxígeno SureFlow para múltiples pacientes y así atender de forma rentable a varios pacientes con una sola fuente de oxígeno. SureFlow es una estación de flujo de diseño único que administra eficazmente oxígeno de grado médico desde un concentrador de oxígeno u otra fuente de oxígeno única. SureFlow está configurado con cinco medidores de flujo de bajo caudal, y puede utilizarse dentro de una amplia gama de configuraciones para adaptarse a una gran variedad de necesidades de los pacientes, permitiendo el suministro de oxígeno para cuidados críticos hasta 10 LPM.

Posicionamiento

- Colocar en una mesa o escritorio
- Montado en la pared

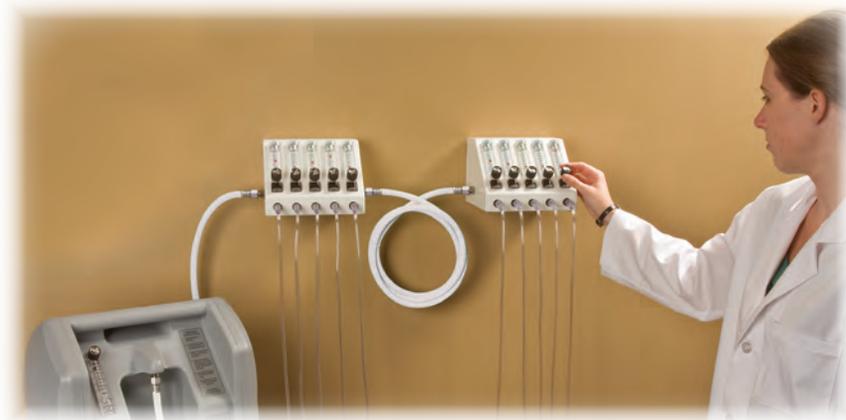

Diversas aplicaciones

- Uso pediátrico a adulto en hospitales, clínicas, refugios de emergencia
- Zonas subdesarrolladas con una infraestructura reducida o inexistente para el suministro de oxígeno terapéutico
- Necesidades de oxígeno pediátrico de bajo flujo en una sala de cuidados intensivos en países de ingresos bajos y medios

Uso ideal

- Sirve hasta cinco personas por unidad SureFlow
- Conecte dos o más unidades SureFlow para atender a más personas

Especificaciones de SureFlow.

CAUDALÍMETROS

Los flujómetros de bajo caudal se pueden utilizar desde 1/10 LPM hasta 1 LPM con incrementos de 0,1/10 LPM con líneas traseras para un ángulo de visión adecuado.

PRECISIÓN DEL CAUDALÍMETRO

±10 % o 200 ml, lo que sea mayor

PRESIÓN MÁXIMA DE SALIDA

138 kPa (20 psig)

DIMENSIONES

5,8 x 9,7 x 7,2 pulgadas
(14,7 x 24,6 x 18,3 cm)

PESO

1,49 kg (3,28 lb)

GARANTÍA

3 años para las piezas

APROBACIONES INTERNACIONALES

CE 0459 (sólo FM069-2)

Certificación ISO 13485:2016



Más información sobre NewLife Intensity 10 y sus accesorios en

CAIREinc.com

**CAIRE®**

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN. Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.

© 2025 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados. ML-CONC0084-3 D