


NEWLIFE® ELITE®

Concentrador de Oxigénio Domiciliário de 5 LPM

AQUELE QUE ESTABELECE OS PADRÕES

Com um desempenho adequado aos ambientes mais difíceis, este concentrador de 5 LPM é fácil de operar, com uma qualidade e fiabilidade comprovadas.

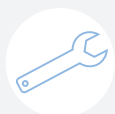

ROBUSTO E DE FÁCIL MANUTENÇÃO

O robusto Elite é altamente qualificado quanto à eficácia e desempenho em ambientes difíceis, temperaturas extremas, climas tropicais e países em desenvolvimento onde a capacidade de assistência é limitada. É também uma opção perfeita para instalações de cuidados a de longa duração.

O design interno simplista torna a assistência e a manutenção simples. Estes concentradores laboriosos são os preferidos dos técnicos em todo o lado.



MAIS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Exclusiva da série de concentradores NewLife®, a opção de Fluxo duplo possui dois medidores de fluxo separados que podem fornecer um total de 5 LPMs. Permitir que dois pacientes recebam oxigénio de um dispositivo ao mesmo tempo é a solução ideal para hospitais, instalações de cuidados de longa duração, clínicas, salas de espera ou em contextos diurnos e noturnos.

Se forem necessárias várias aplicações de baixo fluxo, o Elite pode ser combinado com a estação de divisão de fluxo SureFlow™ para atender até cinco pacientes ao mesmo tempo. O Elite também pode ser usado para alimentar um tratamento de nebulização portátil em vez de um compressor com a saída de ar opcional.



Informações de contacto da CAIRE:
www.caireinc.com

CONSULTE A DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS. Consulte as instruções de utilização do produto aplicáveis para indicações, contraindicações, avisos, precauções e informações detalhadas de segurança.

© 2020 CAIRE Inc. Todos os direitos reservados.

NEWLIFE® ELITE®

Concentrador de Oxigénio Domiciliário de 5 LPM

Inclui

- Concentrador de oxigénio
- Tubo adaptador do humidificador

Características do produto

- Altamente qualificado para ambientes difíceis
- Robustez e fiabilidade comprovadas do NewLife®
- De fácil assistência e manutenção
- Fluxómetro bloqueável
- Opção de fluxo duplo
- Contador de horas de dupla função
- Monitor de Oxigénio Opcional

Especificações

TAXA DE FLUXO

1,0 - 5,0 LPM

DIMENSÕES

28,5 x 15,7 x 14,5 pol.
(72,4 x 40,0 x 36,8 cm)

PESO

24,5 kg (54 lb)

NÍVEL SONORO

53 dB(A)

CONCENTRAÇÃO DE O₂

90 % (+5,5 / -3 %)

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
15-90% de humidade

AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO

De -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)
0-90% de humidade

TUBO MÁXIMO

15,2 m (50 pés)

PLANO DE MANUTENÇÃO

Filtro de entrada – Limpar semanalmente
Filtro de feltro (excluindo os modelos AS005-4, AS005-241 e AS005-263) - Substituição após 1 ano

GARANTIA

3 anos



Acessórios disponíveis



ADAPTADOR E GARRAFA DO HUMIDIFICADOR

Adaptador do humidificador (23 cm)

Pergunte ao seu médico ou terapeuta se a humidificação é adequada para si.



CÂNULAS NASAIS

Estão disponíveis vários comprimentos.
(2,1 m e 7,6 m)

Fale com a nossa equipa de Atendimento ao Cliente para saber mais.



TUBO DE OXIGÉNIO

Disponível em: 2,1 m, 7,6 m e 15,2 m.