


Eclipse 5®

Conçu en pensant à vos patients actifs

Principales caractéristiques et avantages

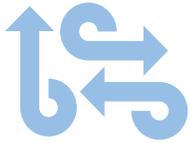

Une polyvalence inégalée

Devenir la norme, dans l'oxygène transportable grâce à sa haute technologie d'administration d'oxygène en débit continu ou pulsé. Avec un design compact et transportable, vos patients peuvent aller n'importe où grâce au chariot de voyage facile à attacher avec une poignée télescopique et des roues durables. La durée de vie prolongée de la batterie, les options d'alimentation CA/CC et la vaste gamme d'accessoires aident vos patients à rester actifs.



O₂ cliniquement efficace

Conçu pour s'adapter aux besoins de vos patients avec des fonctionnalités cliniques uniques, y compris autoSAT®, ajustabilité du trigger, UltraSense™ et myCAIRE™ pour garantir que vos patients recevront l'oxygène dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin.



Saturation adéquate en O₂

Avec 6 réglages jusqu'à 3 l/min en débit continu et 9 réglages jusqu'à 192 ml de bolus en débit pulsé, l'Eclipse 5 répond à un large éventail de besoins des patients. L'appareil fournit jusqu'à 95 % d'oxygène pur pour assurer une saturation adéquate.



Performances éprouvées

L'Eclipse 5 utilise une technologie puissante de séparation de l'air par adsorption sous vide à pression modulée (VPSA) qui élimine efficacement l'azote résiduel tout en offrant la plus haute pureté d'oxygène. La conception robuste permet une maintenance minimale et une longue durée de vie, fournissant ainsi un appareil sur lequel vous pouvez compter.

Caractéristiques techniques

DÉBIT

Flux continu :
6 réglages jusqu'à 3 l/min
Débit pulsé: 9 réglages
jusqu'à 192 ml de bolus

DIMENSIONS

49,0 x 31,2 x 18,0 cm
(19,3 x 12,3 x 7,1 po)

POIDS

6,8 kg/15 lb (sans batterie)
8,4 kg/18,4 lb (avec batterie)

NIVEAU SONORE

40,0 dB(A) au réglage 3
Mode pulsé

SENSIBILITÉ DU DÉCLENCHEMENT

-0,135 à 0,37 cm/H₂O
(réglable)

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Jusqu'à 5,4 h en mode pulsé
Jusqu'à 4,4 h en mode continu

ALIMENTATION

Alimentation CA :
100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz
Alimentation CC : 12 V CC minimum (tous les réglages sont disponibles pour des alimentations CA et CC)
Batterie : Lithium-ion

GARANTIE

3 ans
(tamis inclus)
1 an pour la batterie et les alimentations



Eclipse 5[®]

Vous emmène partout où vous voulez aller

CAIRE[®]
O₂ is what we do.

ALIMENTATION CA
(avec cordon
d'alimentation NEMA)

Numéro d'article

US : 20852326S

UE : 20852325S

RU : 20852324S



CHARIOT UNIVERSEL
(avec poignée
télescopique)

Numéro d'article

5991-SEQ



SAC POUR LES
ACCESSOIRES

Numéro d'article

7104-SEQ



ALIMENTATION CC
(avec prise pour accessoires dans
un véhicule)

Numéro d'article

5942-SEQ



KIT D'ADAPTATEUR
D'HUMIDIFICATEUR
(Flacon de
l'humidificateur
non inclus)

Numéro d'article

7116-SEQ



SAC DE TRANSPORT

Numéro d'article

5010-SEQ



CARTOUCHE D'ALIMENTATION
(BATTERIE)

Numéro d'article 7082-SEQ



CHARGEUR DE BUREAU
DE LA BATTERIE
(Batterie non incluse)

Numéro d'article

7112-SEQ



ADAPTATEUR DE VOYAGE

Numéro d'article 5591-SEQ



KIT D'ACCESSOIRES DE VOYAGE
(Cartouche d'alimentation,
chargeur de bureau, sac de
transport)

Numéro d'article

5093-SEQ



CAPOT DE PROTECTION

Numéro d'article

5052-SEQ



KIT POUR FAUTEUIL ROULANT

Numéro d'article

5220-SEQ



Rendez-vous sur <https://www.iec.ch/world-plugs> pour plus de détails sur les types de prises.

Pour en savoir plus sur Eclipse 5 et ses accessoires, rendez-vous sur

eclipseoxygen.com

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT. Veuillez consulter le mode d'emploi applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit.

© 2022 CAIRE Inc. Tous droits réservés. ML-CONC0148-1 D