


Eclipse 5®

Speziell für Ihre aktiven Patienten entwickelt

Wichtigste Merkmale und Vorteile

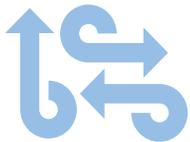

Unerreichte Vielseitigkeit

Mit seinen umfassenden Einstellmöglichkeiten, im kontinuierlichen- oder im impuls-gesteuertem Modus, setzt er den Standard bei transportablen Konzentratoren. Dank seines kompakten Designs können Ihre Patienten den Eclipse mit seinem einfach anzubringenden Transportcaddy mit Teleskopgriff überall mit hinnehmen. Die Akkus mit langen Laufzeiten, die beiden Stromversorgungsmöglichkeiten und eine umfangreiche Auswahl an Zubehör tragen dazu bei, dass Ihre Patienten aktiv bleiben.



Klinisch wirksames O₂

Verfügt über einzigartige Funktionen wie z.B. autoSAT®, einstellbare Abgabezeiten, UltraSense™ und myCAIRE™ um sicherzustellen, dass Ihre Patienten jederzeit den Sauerstoff erhalten, den sie brauchen. Alle Bedürfnisse Ihrer Patienten werden somit abgedeckt.



Passende O₂-Sättigung

Mit 6 Einstellungen bis zu 3 LPM im kontinuierlichen Modus und 9 wählbaren Stufen, bis zu einem Bolus von 192 ml im Impulsmodus, deckt der Eclipse 5 ein breites Spektrum von Patientenbedürfnissen ab. Das Gerät liefert bis zu 95 % reinen Sauerstoff, um die benötigte Sättigung dauerhaft aufrechtzuerhalten.



Bewährte Leistung

Der Eclipse 5 nutzt die leistungsstarke VPSA-Technologie (Vakuum-Druckwechseladsorptionsverfahren), die den Reststickstoff effizient eliminiert und gleichzeitig die höchste Sauerstoffreinheit liefert. Dank der widerstandsfähigen Bauart ist der Wartungsaufwand gering und die Lebensdauer entsprechend lange - Sie erhalten ein Gerät, auf das Sie sich verlassen können.

Technische Daten

DURCHFLUSSRATE

Konstanter Flow:
6 Einstellungen bis zu 3 LPM
Impuls-Modus: 9 Stufen für
bis zu 192 ml Bolus

ABMESSUNGEN

49,0 x 31,2 x 18,0 cm

GEWICHT

6,8 kg (ohne Akku)
8,3 kg (mit Akku)

GERÄUSCHPEGEL

40,0 dB(A) @ Stufe 3
Impulsbetrieb

TRIGGER-EMPFINDLICHKEIT

-0,135–0,37 cm/H₂O
(einstellbar)

AKKULAUFZEIT

bis zu 5,4 Stunden im
Impulsmodus

bis zu 4,4 Stunden im
kontinuierlichen Flow

LEISTUNG

Wechselstromversorgung (AC):
100–240
VAC, 50–60Hz
Gleichstromversorgung
(DC): Mindestens 12 VDC (alle
Einstellungen sind bei AC-
und DC-Stromversorgung
verfügbar)
Akku: Lithium-Ionen

GARANTIE

3 Jahre
(einschließlich Molekularsieb
ATF)
1 Jahr auf Akku und Netzteile



Eclipse 5®

Bringt Sie überall hin

WECHSELSTROM-NETZTEIL (mit Kabel und Stecker)

Artikelnummer
USA: 20852326S
EU: 20852325S
UK: 20852324S



TRANSPORTCADDY (mit Teleskopgriff)

Artikelnummer
5991-SEQ



KLEINE ZUBEHÖRTASCHE

Artikelnummer
7104-SEQ



12V DC NETZTEIL (mit 12V Stecker und Kabel)

Artikelnummer
5942-SEQ



BEFEUCHTERSET (ohne Befeuchterbecher)

Artikelnummer
7116-SEQ



GROSSE REISETASCHE

Artikelnummer
5010-SEQ



AKKU

Artikelnummer 7082-SEQ



TISCHLADEGERÄT (ohne Akku)

Artikelnummer
7112-SEQ



REISESTECKER

Artikelnummer 5591-SEQ



REISETSET (große Reisetasche, Akku, Tischladegerät)

Artikelnummer
5093-SEQ



SCHUTZHÜLLE

Artikelnummer
5052-SEQ



ROLLSTUHLTASCHE

Artikelnummer
5220-SEQ



Einzelheiten zu den Steckertypen, siehe <https://www.iec.ch/world-plugs>.

Weitere Informationen über den Eclipse 5 und Zubehörprodukte finden Sie unter

eclipseoxygen.com

UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG. Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben, Gegenanzeigen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche Sicherheitsinformationen.

© 2022 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten. ML-CONC0148-2 D