


Eclipse 5®

Diseñado pensando en sus pacientes activos

Principales características y beneficios

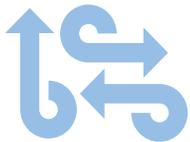

Versatilidad inigualable.

Establecemos el estándar en oxígeno portátil con las capacidades más amplias de suministro de oxígeno en dosis continua y pulsada. Con un diseño compacto y portátil, sus pacientes pueden ir a cualquier lugar utilizando el carrito de viaje fácil de acoplar con mango extensible y ruedas de gran duración. La duración prolongada de la batería, las opciones de alimentación CA/CC y la amplia gama de accesorios ayudan a mantener activos a sus pacientes.



O₂ clínicamente eficaz

Diseñado para adaptarse a las necesidades de sus pacientes con características clínicas únicas, nuestro concentrador incluye autoSAT®, tiempo de entrega ajustable, UltraSense™ y myCAIRE™ para ayudar a garantizar que sus pacientes obtengan el oxígeno que necesitan, cuando lo necesitan.



Saturación adecuada de O₂

Con 6 configuraciones de hasta 3 LPM en flujo continuo y 9 configuraciones de hasta un bolo de 192 ml en modo de pulso, el concentrador Eclipse 5 es perfecto para una amplia gama de pacientes. La unidad proporciona hasta un 95 % de oxígeno puro para garantizar una saturación adecuada.



Rendimiento probado

El Eclipse 5 utiliza la potente tecnología de separación de aire de adsorción por oscilación de presión al vacío (VPSA) que elimina de manera eficiente el nitrógeno residual al tiempo que ofrece la más alta pureza de oxígeno. Su diseño robusto permite un mantenimiento mínimo y una vida útil prolongada, proporcionando un dispositivo en el que puede confiar.

Especificaciones

VELOCIDADES DE FLUJO

Flujo continuo:
6 configuraciones,
hasta 3 LPM

Flujo de pulso:
9 configuraciones,
hasta 192 ml por bolo

DIMENSIONES

49,0 x 31,2 x 18,0 cm
(19,3 x 12,3 x 7,1 pulgadas)

PESO

6,8 kg (sin batería)
8,5 kg (con batería)

NIVEL SONORO

40,0 dB(A) en la
configuración 3 en
Modo de pulso

SENSIBILIDAD DEL MECANISMO DE ACTIVACIÓN

-0,135-0,37 cm/H₂O
(ajustable)

DURACIÓN DE LA BATERÍA

Hasta 5,4 horas en
modo pulso

Hasta 4,4 horas en
modo de flujo continuo

ENERGÍA

Corriente CA:
100-240 V CA, 50-60 Hz
Corriente CC: 12 V CC
como mínimo (todas
las configuraciones
disponibles para fuentes de
alimentación CA y CC)
Batería: iones de litio

GARANTÍA

3 años
(lechos de tamiz incluidos)

1 año en batería y fuentes
de alimentación



Eclipse 5[®]

Le lleva a donde quiera ir

CAIRE[®]
O₂ is what we do.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA
(con cable de alimentación NEMA)

Número de artículo

EE. UU.: 20852326S
UE: 20852325S
REINO UNIDO:
20852324S



CARRITO UNIVERSAL
(con mango extensible)

Número de artículo

5991-SEQ



BOLSA DE ACCESORIOS

Número de artículo

7104-SEQ



FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC
(con conector para accesorios del vehículo)

Número de artículo

5942-SEQ



KIT ADAPTADOR DE HUMIDIFICADOR
(Botella de humidificación no incluida)

Número de artículo

7116-SEQ



ESTUCHE DE VIAJE

Número de artículo

5010-SEQ



CARTUCHO DE ALIMENTACIÓN
(BATERÍA)

Número de artículo 7082-SEQ



CARGADOR DE BATERÍA DE ESCRITORIO
(Batería no incluida)

Número de artículo

7112-SEQ



ADAPTADOR DE VIAJE

Número de artículo 5591-SEQ



KIT DE ACCESORIOS DE VIAJE
(Cartucho de alimentación, cargador de escritorio, estuche de viaje)

Número de artículo

5093-SEQ



FUNDA PROTECTORA

Número de artículo

5052-SEQ



PAQUETE PARA SILLAS DE RUEDAS

Número de artículo

5220-SEQ



Visite <https://www.iec.ch/world-plugs> para obtener detalles sobre los tipos de enchufes.

Obtenga más información sobre nuestro concentrador Eclipse 5 y sus accesorios en

eclipseoxygen.com

CONSULTE LA DECLARACIÓN DE GARANTÍA DEL PRODUCTO PARA OBTENER TODA LA INFORMACIÓN.

Consulte las instrucciones de uso del producto correspondiente para obtener información acerca de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información detallada de seguridad del producto.

© 2022 CAIRE Inc. Todos los derechos reservados. ML-CONC0148-3 D