

COMPANION 5™

Concentratore di ossigeno stazionario da 5 l/min
Certificato CE per la distribuzione internazionale



Qualità. Prestazioni. Affidabilità.

Le dimensioni compatte del Companion 5 si adattano facilmente a qualsiasi abitazione e non ostacolano le attività domestiche quotidiane. Costruito con componenti robusti, il Companion 5 è dotato anche di un esclusivo sistema di ventilazione che garantisce la massima durata, con una produzione che può arrivare a 5 l/min. La provata qualità delle prestazioni conquista la massima fiducia del paziente e riduce al minimo le richieste di intervento tecnico.

Ora, grazie alla soluzione opzionale di telemedicina myCAIRE™, il gestore è in grado di monitorare costantemente le prestazioni del dispositivo, oltre a risolvere eventuali allarmi con la massima comodità da computer o da un dispositivo smart.



TECNOLOGIA E QUALITÀ

L'innovativa tecnologia autoFLOW™ riduce i consumi e i costi energetici, massimizza la purezza dell'ossigeno su tutti i flussi e riduce lo stress dei componenti per la massima durata.



SERENITÀ E PRESTAZIONI

Progettato con un sistema di allarme e comandi di facile comprensione, Companion 5 può essere dotato di tecnologia wireless che consente di collegarsi a myCAIRE, una soluzione di telemedicina che il gestore può utilizzare per fare in modo che al paziente sia sempre garantita l'assistenza necessaria.



COMFORT E FACILITÀ D'USO

È possibile guardare il proprio spettacolo TV preferito, fare il tifo per la squadra del cuore o conversare con i propri cari senza mai preoccuparsi della somministrazione di ossigeno. Companion 5 è ideale per svolgere le normali attività di routine mentre sei a casa.

COMPANION 5™

Concentratore di ossigeno stazionario da 5 l/min
Certificato CE per la distribuzione internazionale

Comprende

- Concentratore di ossigeno
- Tubo adattatore per umidificatore

Caratteristiche del prodotto

- L'ingombro ridotto si adatta facilmente agli spazi domestici
- Basso consumo energetico
- Supporto per umidificatore di facile accesso
- Controlli e allarmi di facile lettura
- Certificato CE
- Soluzione opzionale di telemedicina — myCAIRE™



Specifiche

FLUSSO CONTINUO

Da 0,5 a 5,0 l/min

DIMENSIONI

54,6 x 31,8 x 34,2 cm

PESO

16,3 kg

LIVELLO SONORO

43.74 dB(A) ±0.45 dB(A)
at 3 LPM*

CONCENTRAZIONE O2

90% +5.5%/-3%

CONSUMO DI ENERGIA

285 W a 2 l/min
350 W massimo

TUBO MASSIMO

15,2 m

GARANZIA

3 anni



Accessori disponibili



FLACONE E ADATTATORE PER UMIDIFICATORE


Adattatore per umidificatore (23 cm)

Chiedere al medico o al terapeuta se l'umidificazione è adatta alle proprie esigenze.



CANNULE NASALI

Disponibili nelle lunghezze 2,1 m e 7,6 m
Contattare il servizio clienti per maggiori informazioni.

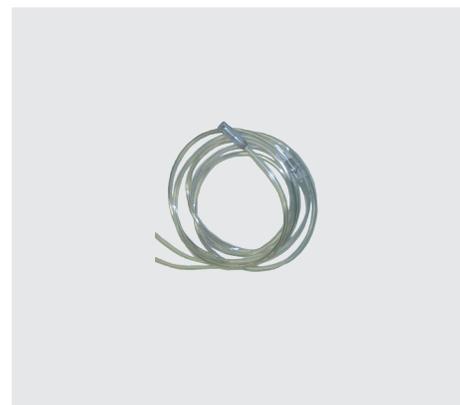

TUBO DELL'OSSIGENO

Disponibile nelle seguenti lunghezze: 2,1 m, 7,6 m e 15,2 m.



Informazioni di contatto CAIRE:
servizioclienti@caireinc.com
www.caireinc.com

*per norma di prova Nr. 14-1 10/2018 MDS-Hi
CONSULTARE LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE.
Consultare le istruzioni per l'uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza. myCAIRE è una soluzione di telemedicina destinata a condividere i dati del dispositivo specificati dal concentratore di ossigeno CAIRE abilitato. myCAIRE non influisce sulle impostazioni, sulle prestazioni o sull'ossigenoterapia del concentratore di ossigeno e non è inteso per il monitoraggio, la diagnosi o il trattamento del paziente. Si prega di chiedere il parere di un medico prima di prendere qualsiasi decisione medica.

© Copyright 2021 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati.

ML-CONC0173-5 C