

FreeStyle® Comfort®

Tecnologia intelligente per garantire la saturazione

CAIRE®
O₂ is what we do.

Titolare per saturare


Il FreeStyle Comfort è progettato per rispondere alla raccomandazione dell'American Association for Respiratory Care (AARC) di "titolare per saturare" offrendo una selezione completa del dosaggio per prevenire la desaturazione al di sotto del 90%. Con l'erogazione di ossigeno a regolazione automatica, il FreeStyle Comfort eroga la dose appropriata di ossigeno esattamente quando è necessario: a riposo e durante l'esercizio.



autoSAT® regola l'erogazione di ossigeno al variare della frequenza respiratoria

- Il mantenimento di una SpO₂ (saturazione di ossigeno) costante è fondamentale per prevenire la desaturazione, ma il tradizionale dosaggio a impulsi diminuisce l'ossigeno erogato per respiro quando la frequenza respiratoria del paziente aumenta.
- La tecnologia autoSAT proprietaria di CAIRE, un sistema di erogazione degli impulsi, mantiene un volume di dosaggio a impulsi costante per ogni respiro al variare della frequenza respiratoria del paziente. È stato clinicamente dimostrato che il dosaggio a impulsi con autoSAT è più efficace nel mantenere una SpO₂ stabile per i pazienti deambulanti.¹
- I pazienti che utilizzano dispositivi di dosaggio a impulsi della concorrenza senza tecnologia autoSAT devono spesso passare all'erogazione a flusso continuo per mantenere la saturazione con l'avanzare della loro malattia. FreeStyle Comfort è stato progettato per garantire il mantenimento del dosaggio prescritto durante l'erogazione, aiutando a sostenere la saturazione di ossigeno del paziente e incoraggiando la deambulazione per una migliore salute fisica e mentale generale. Il FreeStyle Comfort con tecnologia autoSAT permette spesso a questi stessi pazienti di mantenere la saturazione con un dispositivo più piccolo, portatile e compatto.

Il FreeStyle Comfort è l'unico dispositivo che eroga un bolo costante di ossigeno al variare della frequenza respiratoria del paziente.

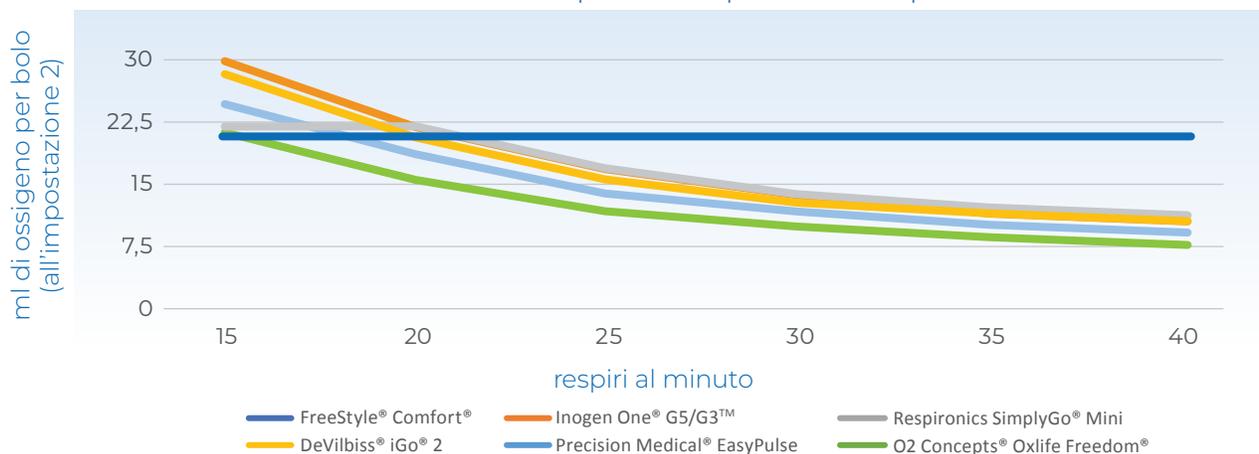

¹A Comparative Study of 3 Portable Oxygen Concentrators During a 6-Minute Walk Test in Patients With Chronic Lung Disease Respir Care. LeBlanc C, Lavallee L, King J, Taylor-Sussex R, Woolnough A and McKim D. 2013;58(10):1598-1605.

Precision Medical® EasyPulse è un marchio registrato di Precision Medical, Inc., una società della Pennsylvania. Inogen One® G5/G3™ è un marchio registrato di Inogen. O2 Concepts® e Oxlife Freedom® sono marchi registrati di O2 Concepts. SimplyGo® Mini è un marchio registrato di Koninklijke Philips N.V. DeVilbiss® e iGo®2 sono marchi registrati di DeVilbiss Healthcare. Dati raccolti dai manuali d'uso dei prodotti pubblicati sui siti web aziendali, dicembre 2020. Il confronto dei prodotti è progettato per dimostrare i progressi tecnici dei più comuni concentratori di ossigeno portatili disponibili in commercio.

Puoi trovare maggiori informazioni sui prodotti FreeStyle Comfort e sugli accessori all'indirizzo

CAIREinc.com

CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE.
Consulta le istruzioni per l'uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.

© 2022 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati. ML-CONCO183-5 B