

OFFREZ D'AVANTAGE DE CONFORT AUX PATIENTS

LE SUMMUM EN MATIÈRE D'OXYGÈNE

FreeStyle™ 5

Concentrateur d'oxygène portable

Un concentrateur d'oxygène portable (COP) grande capacité

Le FreeStyle™ 5 est un nouveau concentrateur d'oxygène au rendement élevé offrant cinq options de paramétrage de pulsation ; cet appareil léger, compact et portable garantit que les patients puissent faire de l'exercice et bénéficier de l'oxygène dont ils ont besoin.

Le FreeStyle 5 est un dispositif au design attractif et contemporain, qui ne ressemble pas à un appareil médical. L'administration d'oxygène par débit pulsé permet aux patients ayant besoin d'un débit important d'être aussi actifs que possible.

L'appareil est facile d'utilisation et son fonctionnement est simple. Le FreeStyle 5 est le COP grande capacité le plus léger du marché, avec un poids de 2,8 kg (6,2 lb) seulement. Les patients bénéficient des avantages de l'appareil FreeStyle standard, notamment sa fiabilité éprouvée et sa robustesse, mais avec une plateforme légèrement plus grande, offrant ainsi une capacité plus élevée.

L'appareil peut être utilisé (et ses batteries rechargées) grâce au bloc d'alimentation CA fourni ou avec un bloc d'alimentation CC distinct. L'ensemble batterie/ceinture AirBelt™ (en option) permet de prolonger encore davantage le temps qu'un patient peut passer loin de toute source d'alimentation électrique.

Ces multiples options d'alimentation permettent aux patients d'utiliser partout et tout le temps ce COP approuvé par la FAA.

CARACTÉRISTIQUES

- △ COP grande capacité
- △ 2,8 kg (6,2 lb) seulement
- △ Approuvé par la FAA (Federal Aviation Administration) pour une utilisation en cours de vol.
- △ Fonctionne avec une batterie rechargeable ou une alimentation CA ou CC
- △ Harnais en option afin de transformer le sac de transport en sac à dos
- △ Jusqu'à sept heures entre les recharges de batterie grâce à la ceinture AirBelt (en option)



Appelez le +1-800-874-0202 pour commander !


CAIRE®
A Chart Industries Company
AirSep® SeQual®
www.CAIREmedical.com




Accessoires et réglages


Le FreeStyle 5 est un COP mobile pouvant être porté en bandoulière grâce à son sac de transport souple. Il peut également être facilement transformé afin de recevoir un harnais (en option) qui vous permettra de le porter comme un sac à dos. Le sac convertible permet même aux patients de porter l'appareil à la taille au moyen de toute ceinture standard ou avec la ceinture AirBelt (en option).

La sacoche fourre-tout peut contenir tous les accessoires d'alimentation relatifs à l'appareil, voire même des ceintures AirBelt supplémentaires si nécessaires.

Afin d'accroître le temps de déplacement, le FreeStyle 5 peut être utilisé sous forme d'un ensemble composé du concentrateur d'oxygène portable, de son confortable étui de transport et de la ceinture AirBelt correspondante. La sortie d'oxygène flexible et pivotante permet un positionnement confortable de la canule. À travers la protection transparente du panneau de réglages, l'appareil affiche également un bouton de test batterie, servant à vérifier l'état de la batterie interne. Des boutons à effleurement, dotés d'une écriture en braille sur l'appareil afin de repérer les paramètres de pulsation, mettent encore plus en valeur le design exceptionnel et l'attention au détail inhérents à ce produit.

(Non illustré) Le FreeStyle 5 est équipé d'un bloc d'alimentation CA et d'un bloc d'alimentation CC pouvant être utilisés pour faire fonctionner l'appareil dans le monde entier et recharger simultanément la batterie interne. Divers types de cordon d'alimentation sont disponibles.

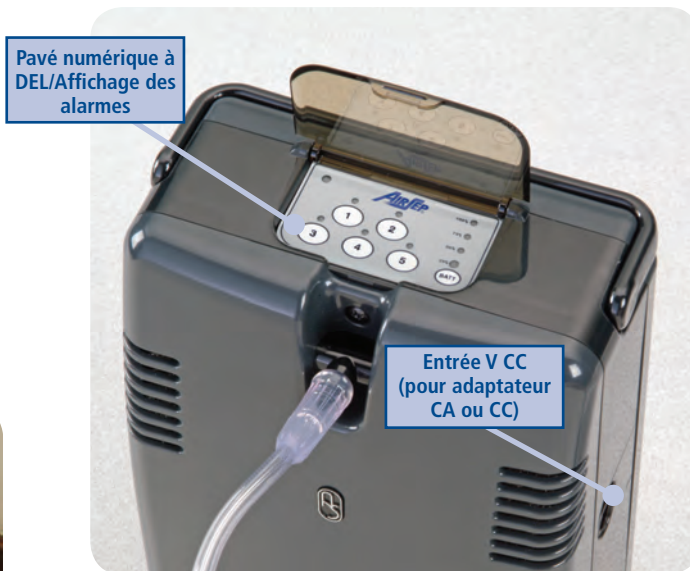

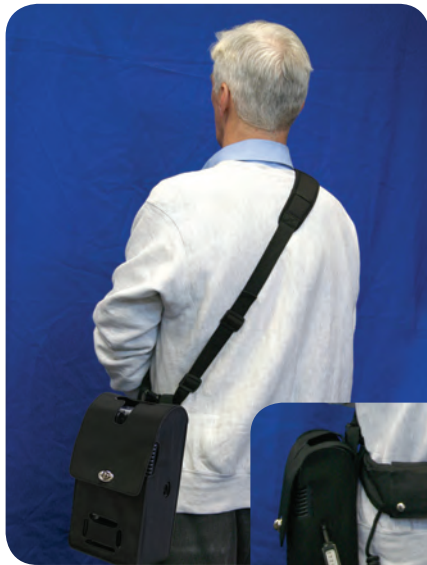

Sac de transport convertible (souple avec sangle confortable) Référence MI371-1



Sacoche fourre-tout pour accessoires FreeStyle 5
Référence : MI372-1



Harnais « sac à dos » pour sac de transport convertible Référence : MI284-1

Caractéristiques techniques

Paramétrage	Paramètres de pulsation numérotés de 1 à 5
Concentration en oxygène*	90 % oxygène + 5,5/- 3 %
Dimensions	27,2 cm H x 16,8 cm l x 11,2 cm P (10,7 po H x 6,6 po l x 4,4 po P)
Poids	2,8 kg (6,2 lb) ; ceinture AirBelt en option 0,8 kg (1,8 lb)
Alimentation	Alimentation CA : 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2 ampères Alimentation CC : 12-24 V CC, 15 ampères max Batterie au lithium rechargeable
Durée de la batterie	Paramètre 5 : 1 heure Paramètre 4 : 1,25 heure Paramètre 3 : 1,5 heure Paramètre 2 : 2 heures Paramètre 1 : 3 heures
Temps de charge	3,25 heures
Durée de la batterie de la ceinture AirBelt (en option)	Paramètre 5 : 2 heures Paramètre 4 : 3 heures Paramètre 3 : 3,5 heures Paramètre 2 : 4,5 heures Paramètre 1 : 7 heures
Temps de charge	3 heures
Durée de vie de la batterie	Environ 300 cycles, puis 80 % ou moins de la capacité
Temps de mise en route	2 minutes
Alarmes sonores et indicateurs visuels Dysfonctionnement général	Démarrage, Débit de pulsation, Canule débranchée, Batterie faible, État de charge de la batterie,
Altitude	Jusqu'à 3 657,6 m (12 000 pi) (des altitudes plus élevées peuvent affecter la performance.)

*Sur la base d'une pression atmosphérique de 101 kPa (14,7 psia) à 21 °C (70 °F). L'utilisation de l'appareil en dehors de la plage de température de fonctionnement peut en affecter la performance.

FreeStyle™ 5

Concentrateur d'oxygène portable



GARANTIE

FreeStyle 5 comporte une garantie de trois ans sur les pièces. La batterie interne ainsi que la ceinture AirBelt sont couvertes par une garantie d'un an.

HOMOLOGATIONS INTERNATIONALES

CE 0459

Certifié ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003.

HOMOLOGATIONS POUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES

L'utilisation du FreeStyle 5 à bord d'un avion en vol a été approuvée par la Federal Aviation Administration (FAA).

Informations de commande

Description

Concentrateur d'oxygène portable FreeStyle 5 avec cordon d'alimentation de type États-Unis

Référence catalogue*

AS077-1

Concentrateur d'oxygène portable FreeStyle 5 avec cordon d'alimentation de type européen

AS077-2

Concentrateur d'oxygène portable FreeStyle 5 avec cordon d'alimentation de type australien

AS077-3

Concentrateur d'oxygène portable FreeStyle 5 avec cordon d'alimentation de type Royaume-Uni

AS077-4

Accessoires

Ceinture AirBelt avec batterie, bloc d'alimentation CA et cordon d'alimentation de type États-Unis

BT017-1

Ceinture AirBelt avec batterie, bloc d'alimentation CA et cordon d'alimentation de type européen

BT017-2

Ceinture AirBelt avec batterie, bloc d'alimentation CA et cordon d'alimentation de type australien

BT017-3

Ceinture AirBelt avec batterie, bloc d'alimentation CA et cordon d'alimentation de type Royaume-Uni

BT017-4

*Les références catalogue sont valables pour la version américaine des produits. Pour connaître les références des autres langues, veuillez contacter le service client.

CAIRE, Inc.
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA 30107, États-Unis
Tél +1-716-691-0202 • Numéro vert +1-800-874-0202
Fax +1-716-691-4141

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way
Wokingham RG41 2PL, Royaume-Uni
Tél +44(0) 1189 367060 • Fax +44(0) 1189 799245