

NewLife® Intensity® 10

Concentrateur stationnaire à haut débit

CAIRE®
O₂ is what we do.



UNE CONCEPTION ÉPROUVÉE
DISTRIBUTION POLYVALENTE D'OXYGÈNE
FACILITÉ D'ENTRETIEN



Solution fiable d'oxygène thérapeutique conçue pour les flottes d'équipements médicaux dans le monde entier

Conception innovante et durable en matière de distribution d'oxygène

Depuis son lancement en 2009, le NewLife Intensity 10 est un concentrateur stationnaire haut débit réputé qui répond aux besoins en oxygène des patients dans plus de 100 pays, notamment pour des applications spécialisées à domicile et dans les établissements de soins médicaux.

Une conception éprouvée

- **Fiabilité inégalée dans le secteur** – un taux de fiabilité supérieur à 99 %, immédiatement et un taux de réparation sous garantie inférieur à 2 %*
- **Garantie complète** – garantie de 3 ans sur l'appareil
- **Durabilité** – conçu avec un compresseur et des lits de tamisage surdimensionnés pour minimiser les besoins de maintenance

Distribution polyvalente d'oxygène

- **Distribution d'oxygène** – concentration jusqu'à 95,5 % à un débit allant jusqu'à 10 l/min, répondant à un large éventail de prescriptions des patients
- **Pression de sortie élevée** – le premier concentrateur d'oxygène offrant 20 psi (137,9 kPa) pour les applications spécialisées et un tube d'oxygène allant jusqu'à 200 ft (61 m)
- **Efficacité énergétique** – consommation d'énergie réduite, ce qui minimise les coûts de la facture énergétique du patient

Facilité d'entretien

- **Entretien minimal** – conception et performances de qualité éprouvées pour minimiser les interventions
- **Conception modulaire** – la réduction du nombre de composants permet de réduire le temps et les efforts nécessaires à l'entretien de l'appareil.
- **Diagnostics améliorés** – les alertes d'alarme intégrées permettent un dépannage rapide.

* données versées au dossier



Spécifications techniques du NewLife Intensity 10

DÉBIT

2,0 – 10,0 l/min

DIMENSIONS

27,5 x 16,5 x 14,5 in
(69,9 x 41,9 x 36,8 cm)

POIDS

26,3 kg (58 lb)

NIVEAU SONORE

58 dB(A)

PRESSION DE SORTIE

138 kPa (20 psig)

ALIMENTATION

600 W

LONGUEUR MAXIMALE DU TUBE

61 m (200 ft)

GARANTIE

3 ans

CALENDRIER D'ENTRETIEN

Filtre en feutre – Changer après 1 an
Filtre d'admission – Nettoyer
chaque semaine



Accessoires

LUNETTES A OXYGENE

Adulte

2,1 m (7 ft) CU002-1
7,6 m (25 ft) CU002-4

Pédiatrique

2,1 m (7 ft) CU002-7



BOUTEILLE D'HUMIDIFICATEUR

Numéro d'article HU003-1

Débit 6-15 l/min HU014-1



MASQUE

Adulte, Concentration

(Style par-dessus l'oreille)
2,1 m (7 ft)
CU006-1



Pédiatrique, Concentration

2,1 m (7 ft)
CU007-1



TUBES D'OXYGÈNE

2,1 m (7 ft) CU004-2
7,6 m (25 ft) CU004-3
15,2 m (50 ft) CU004-1

ADAPTATEUR DE SORTIE D'OXYGÈNE

Numéros d'article

Noir F0025-1
Vert B-776945-00



SureFlow™


Distribution efficace d'oxygène pour plusieurs patients à partir d'une seule source

Contrôle du débit pour plusieurs patients

Combinez le NewLife Intensity 10 avec le distributeur d'oxygène multi-patients SureFlow pour fournir l'oxygène de manière rentable plusieurs patients avec une seule source. SureFlow est un dispositif de distribution de conception unique qui administre efficacement de l'oxygène de qualité médicale à partir d'un concentrateur d'oxygène ou d'une autre source d'oxygène unique. Le SureFlow est configuré avec cinq débitmètres à faible débit, et peut être utilisé dans un large éventail de contextes pour répondre à une grande variété de besoins des patients, permettant la distribution d'oxygène pour les soins critiques jusqu'à 10 l/min.

Installation

- Posé sur une table ou un bureau
- Fixé au mur

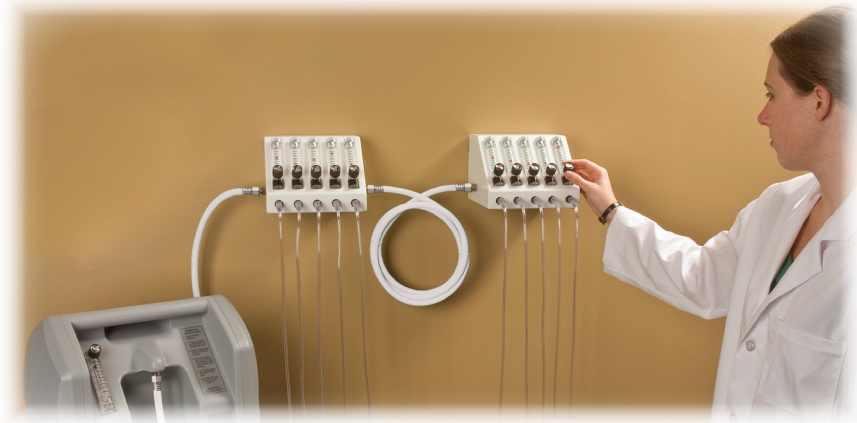

Diverses applications

- Utilisation pédiatrique et adulte dans les hôpitaux, les cliniques et les centres d'urgence
- Utilisation dans les zones sous-développées avec une infrastructure réduite ou inexistante en matière de distribution d'oxygène médical
- Pour répondre aux besoins en oxygène pédiatrique à faible débit dans une pouponnière de soins intensifs dans les pays à revenu faible ou intermédiaire

Utilisation idéale

- Fournir jusqu'à cinq personnes par unité SureFlow
- Connecter deux ou plusieurs unités SureFlow ensemble pour desservir plus de personnes

Caractéristiques techniques du SureFlow

DÉBITMÈTRES

Des débitmètres à faible débit peuvent être utilisés de 0,1 l/min à 1 l/min avec des incréments de 0,1 l/min indiqués par des graduations arrières pour un meilleur angle de vue.

PRÉCISION DU DÉBITMÈTRE

±10 % ou 200 mL, selon la valeur la plus élevée

PRESSIION D'ENTRÉE MAXIMALE

138 kPa (20 psig)

DIMENSIONS

5,8 x 9,7 x 7,2 in
(14,7 x 24,6 x 18,3 cm)

POIDS

1,49 kg (3,28 lb)

GARANTIE

3 ans sur les pièces

HOMOLOGATIONS INTERNATIONALES

CE 0459 (FM069-2 uniquement)
Certifié ISO 13485:2016



Pour en savoir plus sur NewLife Intensity 10 et les produits accessoires, consultez le site suivant

CAIREinc.com


CAIRE®

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT. Veuillez consulter le mode d'emploi applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit.

© 2022 CAIRE Inc. Tous droits réservés. ML-CONC0084-1 C