

NewLife® Intensity® 10

Stationärer High-Flow-Konzentrator

CAIRE®
O₂ is what we do.



BEWÄHRTE KONSTRUKTION
VIELSEITIGE SAUERSTOFFZUFUHR
BEDIENKOMFORT



Bewährte therapeutische Sauerstofflösung für medizinische Geräteflotten auf der ganzen Welt

Zukunftsträchtige Innovation in der Sauerstoffversorgung

Seit seiner Markteinführung im Jahr 2009 wird der NewLife Intensity 10 in mehr als 100 Ländern weltweit als bewährter stationärer High-Flow-Konzentrator eingesetzt, um den Sauerstoffbedarf von Patienten zu decken, einschließlich spezieller Anwendungen in Heimen und medizinischen Einrichtungen.

Bewährte Konstruktion

- **Branchenführende Zuverlässigkeit:** Zuverlässigkeit von mehr als 99 %, sofort einsatzbereit und Garantiereparaturquote unter 2 %*
- **Umfassende Garantie:** 3 Jahre Gerätegarantie
- **Langlebig:** konstruiert mit besonders großen Kompressor und Siebbetten, um den Wartungsaufwand möglichst klein zu halten

Vielseitige Sauerstoffzufuhr

- **Sauerstoffzufuhr:** bis zu 95,5 % Konzentration bei bis zu 10 Liter/Minute, für unterschiedlichste Verschreibungen für Patienten
- **Hoher Ausgangsdruck:** der erste Sauerstoffkonzentrator mit einem Druck von 20 psi für Spezialanwendungen und bis zu gut 60 m (200 Fuß) langen Sauerstoffschläuchen
- **Energieeffizient:** geringerer Stromverbrauch und damit geringere Energiekosten für die Patienten

Bedienkomfort

- **Minimaler Wartungsaufwand:** bewährtes hochwertiges Design und Leistung für minimalen Wartungsbedarf
- **Modularer Aufbau:** weniger Komponenten reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Geräewartung
- **Verbesserte Diagnose:** Onboard-Alarmmeldungen ermöglichen eine schnelle Fehlerbehebung

*Daten vorliegend



NewLife Intensity 10 – Spezifikationen

DURCHFLUSSRATE

2,0–10,0 Liter/Minute

ABMESSUNGEN

69,9 x 41,9 x 36,8 cm
(27,5 x 16,5 x 14,5 Zoll)

GEWICHT

26,3 kg (58 Pfund)

GERÄUSCHPEGEL

58 dB(A)

AUSGANGSDRUCK

20 psig (138 kPa)

LEISTUNG

600 W

MAXIMALE SCHLAUHLÄNGE

61 m (200 Fuß)

GARANTIE

3 Jahre

WARTUNGSPLAN

Filzfilter – 1 Mal jährlich austauschen
Ansaugfilter – wöchentlich reinigen



Zubehör

NASENKANÜLE

Erwachsene

2,1 m (7 Fuß) CU002-1
7,6 m (25 Fuß) CU002-4

Pädiatrie

2,1 m (7 Fuß) CU002-7



LUFTBEFEUCHTERFLASCHE

Artikelnummer HU003-1

Durchflussrate 6–15 LPM
HU014-1



MASKE

Erwachsener, Konzentration
(über dem Ohr getragen)

2,1 m (7 Fuß)
CU006-1



Pädiatrie, Konzentration

2,1 m (7 Fuß)
CU007-1



SAUERSTOFFSCHLÄUCHE

2,1 m (7 Fuß) CU004-2
7,6 m (25 Fuß) CU004-3
15,2 m (50 Fuß) CU004-1

SAUERSTOFF-AUSLASSADAPTER

Artikelnummer

Schwarz F0025-1

Grün B-776945-00



SureFlow™


Kosteneffektive Sauerstoffversorgung für mehrere Patienten aus einer einzigen Quelle

Durchflussregelung für mehrere Patienten

Kombinieren Sie den NewLife Intensity 10 mit der SureFlow-Sauerstoff-Flow-Station für mehrere Patienten. Damit können Sie mehrere Patienten kostengünstig mit einer einzigen Sauerstoffquelle versorgen. SureFlow ist eine Flow-Station mit einzigartiger technischer Konzeption, die medizinischen Sauerstoff von einem Sauerstoffkonzentrator oder einer anderen Sauerstoffquelle effektiv verabreicht. SureFlow ist mit fünf Low-Flow-Durchflussmessern konfiguriert und kann in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden. Dort erfüllt das Gerät ganz unterschiedliche Patientenbedürfnisse und ermöglicht eine Sauerstoffzufuhr für die Intensivpflege von bis zu 10 Liter/Minute (LPM).

Aufstellen

- Auf einen Tisch oder Schreibtisch stellen
- Wandbefestigung

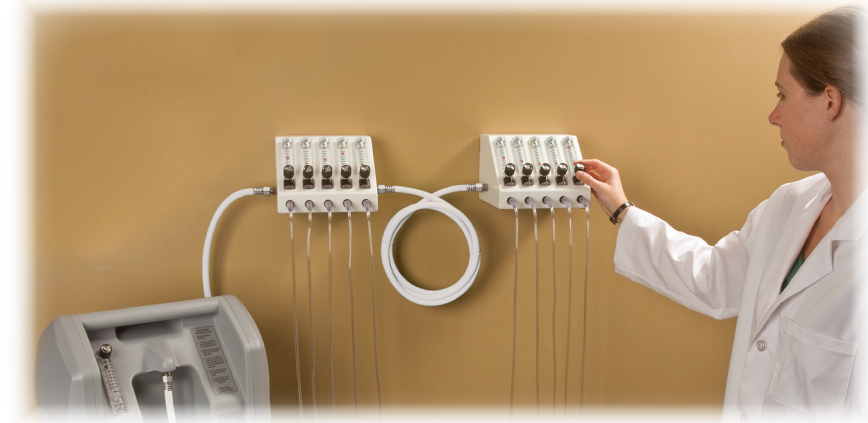

Vielfältige Anwendungen

- Für den Einsatz bei Kindern und Erwachsenen in Krankenhäusern, Kliniken und Notunterkünften
- Für den Einsatz in unterentwickelten Gebieten mit eingeschränkter oder fehlender Infrastruktur für die Versorgung mit therapeutischem Sauerstoff
- Low-Flow-Sauerstoffbedarf in der Pädiatrie in Intensivstationen in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen

Ideale Nutzung

- Für die Versorgung von bis zu fünf Personen pro SureFlow-Einheit
- Verbinden Sie zwei oder mehr SureFlow-Einheiten miteinander, um mehr Personen zu versorgen

SureFlow – Spezifikationen

DURCHFLUSSMESSER

Low-Flow-Durchflussmesser können für Durchflussmengen von 0,1 Liter/Minute bis 1 Liter/Minute mit Abstufungen von 0,1 Litern/Minute verwendet werden und weisen eine Markierungslinie auf der Rückseite zur Gewährleistung des richtigen Ablesewinkels auf.

GENAUIGKEIT DES DURCHFLUSSMESSERS

±10 % oder 200 ml, je nachdem, was größer ist

MAXIMALER EINGANGSDRUCK

138 kPa (20 psig)

ABMESSUNGEN

14,7 x 24,6 x 18,3 cm
(5,8 x 9,7 x 7,2 Zoll)

GEWICHT

1,49 kg (3,28 Pfund)

GARANTIE

3 Jahre auf Teile

INTERNATIONALE ZULASSUNGEN

CE 0459 (nur FM069-2)
ISO 13485:2016-zertifiziert



Weitere Informationen über NewLife Intensity 10 und Zubehörprodukte finden Sie unter

CAIREinc.com

**CAIRE®**

UMFASSENDE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER ERKLÄRUNG ZUR PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG. Bitte lesen Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung für Produktangaben, Gegenanzeigen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und ausführliche Sicherheitsinformationen.

© 2022 CAIRE Inc. Alle Rechte vorbehalten. ML-CONC0084-2 C