


Eclipse 5®

Progettato pensando ai pazienti attivi

CAIRE®
O₂ is what we do.

Caratteristiche e vantaggi principali

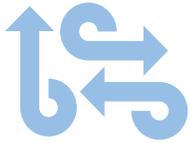

Versatilità senza confronti

Stabilisce lo standard nell'ossigeno in movimento con le più ampie capacità di erogazione con flusso continuo e pulsato. Con un design compatto e trasportabile, i pazienti possono andare ovunque utilizzando un carrello con impugnatura telescopica e ruote resistenti, molto facile da installare. La maggiore durata della batteria, le opzioni di alimentazione CA/CC e l'ampio portafoglio di accessori aiutano a mantenere attivi i pazienti.



O₂ clinicamente efficace

Progettato con caratteristiche cliniche uniche tra cui autoSAT®, tempo di salita regolabile, UltraSense™ e myCAIRE™, per garantire che i pazienti ricevano l'ossigeno di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.



Saturazione corretta di O₂

Con 6 impostazioni fino a 3 LPM in flusso continuo e 9 impostazioni fino a un bolo di 192 mL in modalità pulsata, Eclipse 5 soddisfa un'ampia gamma di esigenze del paziente. L'unità eroga fino al 95% di ossigeno puro per garantire ulteriormente la corretta saturazione.



Prestazioni comprovate

Eclipse 5 utilizza la potente tecnologia di separazione dell'aria Adsorbimento a pressione variabile sotto vuoto (Vacuum Pressure Swing Adsorption, VPSA) che elimina in modo efficiente l'azoto residuo fornendo la massima purezza dell'ossigeno. Le robuste caratteristiche di progettazione consentono una manutenzione minima e una lunga durata, fornendo un dispositivo su cui fare affidamento.

Specifiche

PORTATA

Flusso continuo:
6 impostazioni fino a 3 LPM
Flusso di pulsato: 9
impostazioni fino a 192 mL
di bolo

DIMENSIONI

49,0 x 31,2 x 18,0 cm

PESO

6,8 kg (senza batteria)
8,3 kg (con batteria)

LIVELLO SONORO

40,0 dB(A) all'impostazione
3 modalità pulsata

SENSIBILITÀ DI ATTIVAZIONE

-0,135-0,37 cm/H₂O
(regolabile)

DURATA DELLA BATTERIA

fino a 5,4 ore in modalità a
flusso pulsato
fino a 4,4 ore in modalità
flusso continuo

ALIMENTAZIONE

Alimentazione CA:
100-240 VCA, 50-60 Hz
Alimentazione CC:
Minimo 12 V CC (tutte le
impostazioni disponibili
con alimentazione CA e CC)
Batteria: Ioni di litio

GARANZIA

3 anni
(include i setacci
molecolari)
1 anno su batteria e
alimentatori



Eclipse 5®

Porta ovunque si desideri andare

CAIRE®
O₂ is what we do.

ALIMENTATORE CA (con cavo di alimentazione NEMA)

Codice articolo

USA: 20852326S

UE: 20852325S

Regno Unito: 20852324S



CARRELLO UNIVERSALE (con impugnatura telescopica)

Codice articolo

5991-SEQ



BORSA DEGLI ACCESSORI

Codice articolo

7104-SEQ



ALIMENTATORE CC (con presa per accessori per veicoli)

Codice articolo

5942-SEQ



KIT ADATTATORE UMIDIFICATORE (flacone umidificatore non incluso)

Codice articolo

7116-SEQ



CUSTODIA DA VIAGGIO

Codice articolo

5010-SEQ



KIT ACCESSORIO VIAGGIO (cartuccia di alimentazione, caricatore da tavolo, custodia da viaggio)

Codice articolo

5093-SEQ



CARTUCCIA DI ALIMENTAZIONE (BATTERIA)

Codice articolo

7082-SEQ



CARICABATTERIE DESKTOP (batteria non inclusa)

Codice articolo

7112-SEQ



ADATTATORE DA VIAGGIO

Codice articolo 5591-SEQ



COPERTURA PROTETTIVA

Codice articolo

5052-SEQ



GRUPPO PER SEDIA A ROTELLE

Codice articolo

5220-SEQ



Vedi <https://www.iec.ch/world-plugs> per dettagli sui tipi di spine.

Puoi trovare maggiori informazioni sui prodotti Eclipse 5 e sugli accessori all'indirizzo

eclipseoxygen.com

CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE.

Consulta le istruzioni per l'uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza.

© 2022 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati. ML-CONC0148-5 D