


Eclipse 5®

Concebido a pensar nos pacientes ativos

Principais funcionalidades e benefícios

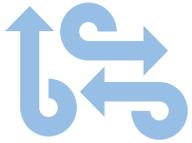

Versatilidade inigualável

Estabelecer o padrão do oxigénio transportável com as capacidades de fornecimento de oxigénio mais amplas em dose contínua e por impulsos. Num design compacto e transportável, os seus pacientes podem ir a qualquer local utilizando o carrinho de viagem de fácil colocação com uma pega extensível e rodas resistentes. A autonomia prolongada da bateria, as opções de alimentação CA/CC e a vasta gama de acessórios ajudam a manter os seus pacientes ativos.



O₂ clinicamente eficaz

Concebido para se adaptar às necessidades dos seus pacientes com funcionalidades clínicas únicas, incluindo autoSAT®, tempo de subida ajustável, UltraSense™ e myCAIRE™ para ajudar a garantir que os seus pacientes recebem o oxigénio de que precisam, quando precisam.



Saturação adequada de O₂

Com 6 definições até 3 L/min em fluxo contínuo e 9 definições com bolus até 192 mL em fluxo por impulsos, o Eclipse 5 serve uma grande variedade de necessidades dos doentes. A unidade fornece oxigénio com uma pureza até 95% para garantir ainda mais a saturação adequada.



Desempenho comprovado

O Eclipse 5 utiliza a tecnologia avançada de separação de ar por adsorção sob vácuo (VPASA) que elimina eficazmente o nitrogénio residual enquanto fornece a mais alta pureza de oxigénio. As características robustas do design permitem uma manutenção mínima e uma longa vida útil, que fazem deste um dispositivo fiável.

Especificações

DÉBITO

Fluxo contínuo:
6 definições até 3 L/min
Fluxo por impulsos:
9 definições com bolus
até 192 L/min

DIMENSÕES

19,3 x 12,3 x 7,1 pol.
(49,0 x 31,2 x 18,0 cm)

PESO

6,8 kg (15 lbs) (sem bateria)
8,3 kg (18,4 lbs) (com bateria)

NÍVEL DE SOM

40,0 dB(A) na Definição 3
Modo de impulsos

SENSIBILIDADE DO ACIONADOR

-0,135-0,37 cm/H₂O
(ajustável)

AUTONOMIA DA BATERIA

até 5,4 horas em modo de impulsos
até 4,4 horas em modo de fluxo contínuo

ALIMENTAÇÃO

Alimentação CA: 100-240 VCA, 50-60 Hz
Alimentação CC: mínimo de 12 VCC (todas as definições disponíveis em fonte de alimentação CA e CC)
Bateria: íões de lítio

GARANTIA

3 anos
(Inclui camadas de peneira molecular)
1 ano para a bateria e fontes de alimentação



Eclipse 5®

Leva-o para todo o lado

CAIRE®
O₂ is what we do.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA (Com cabo de alimentação NEMA)

Número do artigo

EUA: 20852326S

UE: 20852325S

REINO UNIDO: 20852324S



CARRINHO UNIVERSAL (Com pega extensível)

Número do artigo

5991-SEQ



BOLSA DE ACESSÓRIOS

Número do artigo

7104-SEQ



KIT ADAPTADOR DE HUMIDIFICADOR (Garrafa humidificadora não incluída)

Número do artigo

7116-SEQ



MALA DE VIAGEM

Número do artigo

5010-SEQ



FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC (Com ficha para utilizar acessórios em veículos)

Número do artigo

5942-SEQ



KIT DE ACESSÓRIOS DE VIAGEM (Cartucho de bateria, carregador convencional, mala de viagem)

Número do artigo

5093-SEQ



CARTUCHO DE BATERIA

Número do artigo

7082-SEQ



CARREGADOR DE BATERIA CONVENCIONAL (Bateria não incluída)

Número do artigo

7112-SEQ



ADAPTADOR DE VIAGEM

Número do artigo

5591-SEQ



COBERTURA DE PROTEÇÃO

Número do artigo

5052-SEQ



PACK DE CADEIRA DE RODAS

Número do artigo

5220-SEQ



Consulte <https://www.iec.ch/world-plugs> para obter mais informações sobre os tipos de tomadas.

Saiba mais sobre o Eclipse 5 e os acessórios em

eclipseoxygen.com

CONSULTE A DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS. Consulte as instruções de utilização do produto para obter mais informações sobre as indicações, as contraindicações, os avisos, as precauções e as informações de segurança detalhadas do produto aplicável.

© 2022 CAIRE Inc. Todos os direitos reservados. ML-CONCO148-6 D